

Vacuson 6o LP, Liposuktion im Dienste der Schönheit

Höchste Zuverlässigkeit und einfachste Bedienung sind die herausragenden Merkmale dieses Systems für die Liposuktion. Weltweit bekannt für seine starke Leistung wird es von Meistern der Schönheitschirurgie eingesetzt.

Das Liposuktions-Absaugsystem Vacuson 6o LP mit integrierter Infiltrationspumpe und ergonomischem Konformkanülen-Handstück ist ein komplett ausgestattetes System für die Schönheitschirurgie. Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten unterstützen die kontrollierte Bewegung der Kanüle im Gewebe, sorgen für einen schonenden Eingriff

und sind die Voraussetzung für optimale kosmetische Resultate. Das Handstück ist auch mit allen anderen gängigen Kanülen kompatibel. Der Fokus des Chirurgen bleibt beim Patienten, während die Vacuson 6o LP über das Pedal gesteuert wird.

Vorzüge für den Patienten:

- Optimale kosmetische Resultate
- Sanfte Behandlung
- Gewebeschonende Behandlung
- Schnelle Erholung nach dem Eingriff

Vorzüge für den Chirurgen:

- Zielgenaues arbeiten/optimale Absaug-Resultate
- Erleichtert die Arbeit/sanfte Behandlung
- Kürzere OP-Zeiten
- Optimale Zeit-/Kosten-Bilanz
- Schonendste Patienten-Behandlung
- Handstück kompatibel mit anderen Kanülen



Typ:	Vacuson 6o LP
Betriebsspannung:	115/230 Volt bei 50-60 Hz
Saugleistung, Absaugpumpe:	max. 6o l/min
Max. Vakuum, Absaugpumpe:	-o,9 bar /686 mmHG
Fördermenge Infiltrationspumpe:	2 bis 22 l/h
Max. Druck Infiltrationspumpe:	2,5 bar
Hub, Konformkanüle:	2,0 mm
Frequenz Konformkanüle:	36oo Hübe/min
Motor, Konformkanüle:	Sterilisierbarer Elektronikmotor

Vacuson 6o LP mit Konformkanülen-Handstück ist in Belgien und den USA nicht erhältlich.

Details



Infiltrationspumpe

Die seitlich am Vacuson 6o LP angebrachte Infiltrationspumpe mit ihrer übersichtlichen Schlauchsetaufnahme wird über einen praktischen Öffnungsmechanismus bedient. Die Fixierung des Schlauchs geschieht über seitliche Klemmhebel. Die Peristaltikpumpe kann dadurch sehr einfach mit einem frischen Schlauchset bestückt werden.




Doppelkolben Pumpe, max. Vacuum bis zu -0,9 bar/686 mmHG

Die hohe Leistung der Vacuson 6o LP Vacuumpumpe von 6o Litern pro Minute wird durch eine Doppelkolben-Pumpe erreicht, welche dank PTFE-Graphit-Kolbenringen ohne Schmiermittel betrieben wird. Die gleichmässige, pulsfreie Art der Absaugung dieser Vacuumpumpe ist ein wichtiges Kriterium für eine schonende Behandlung in der Liposuktion.



Konformkanülen-Handstück

Mit dem Konformkanülen-Handstück wird neben dem Absaugen der Fettzellen, durch den Kanülen-Hub von 3600 Hüben pro Minute, auch das Gewebe aufgelockert, damit die Absaugung effektiver erfolgen kann. Der Hub von 2 Millimetern reicht aus um das Gewebe zu lockern und die Fettzellen freizugeben.

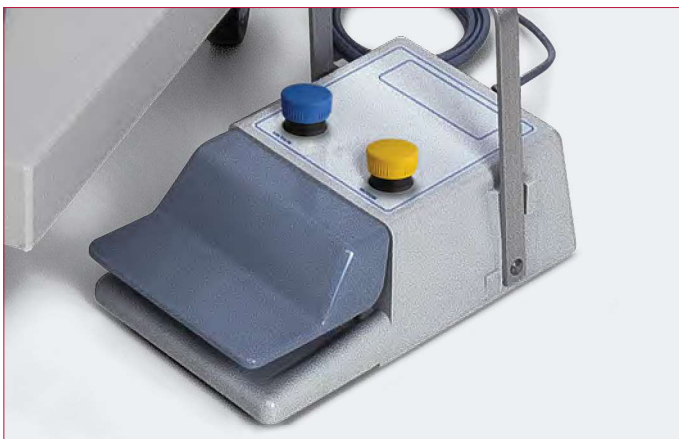

Vario-Pedal

Nach dem Einstellen des maximal per Pedal abrufbaren Vacuums am Steuergerät wird das Gerät grundsätzlich über das Pedal gesteuert. Der blaue Fusschalter links setzt die Absaugpumpe in Gang. Der gelbe Fusschalter rechts ist für den Start des Antriebs des Kanülenhubs verantwortlich. Mit dem Pedal wird die Infiltrationsleistung bis zum eingestellten Maximalwert abgerufen. Durch den praktischen Bügel am Pedal lässt sich das Pedal mit dem Fuss an den gewünschten Ort bewegen.